


## ISTRUZIONI UTENTE PER LA CREAZIONE DEL CD/DVD

UTILIZZANDO LE IMMAGINI SCARICATE DAL PORTALE: <https://radiologia.asst-pini-cto.it>

### ISTRUZIONI PER CREARE UN CD/DVD, IN SINTESI:

- 1) **Creare** e nominare una Directory (*/nome*) specifica sul proprio PC (per esempio, C:\CD IMMAGINI);
- 2) **Copiare** nella stessa Directory (*/nome*) il file archivio .zip relativo a **MicroDicom viewer CD/DVD**, **scaricato** da <http://www.microdicom.com/downloads.html>;
- 3) **Copiare** nella stessa Directory (*/nome*) il file archivio .zip relativo alle **Immagini di radiologia**, **scaricato** da <https://radiologia.asst-pini-cto.it>;
- 4) **Decomprimere** nella stessa Directory (*/nome*) il contenuto dei due files archivio .zip;
- 5) **Masterizzare** sul CD/DVD tutto il contenuto della Directory (*/nome*);
- 6) Per visualizzare le immagini successivamente, **inserire** il CD/DVD nel lettore, l'applicativo MicroDicom si eseguirà automaticamente, diversamente accedere al CD/DVD ed **eseguire** il file "run.bat".

### 1) Creare e nominare una Directory (/nome) specifica sul proprio PC (per esempio, C:\CD IMMAGINI)

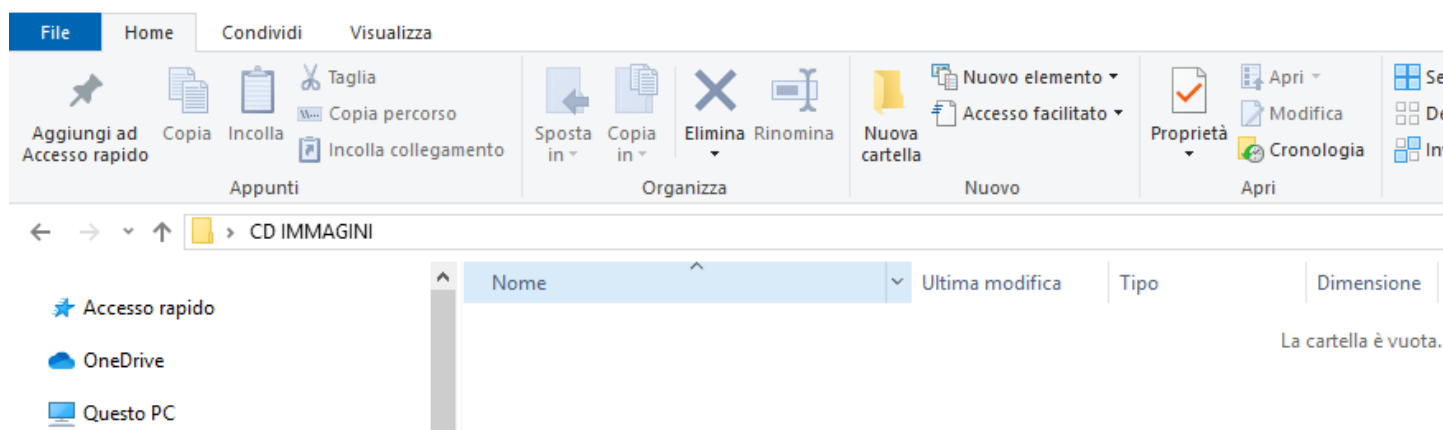

### 2) Copiare nella stessa Directory (/nome) il file archivio .zip relativo a MicroDicom viewer CD/DVD, scaricato da <http://www.microdicom.com/downloads.html>;

Accedere al sito

<http://www.microdicom.com/downloads.html>

e scaricare MicroDicom viewer CD/DVD,

Downloads | MicroDicom DICOM X

www.microdicom.com/downloads.html

MicroDicom

Featured in Forbes

Fix misplaced commas, misused words, grammar goofs, and more with Grammarly. Try now

Grammarly **DOWNLOAD**

HOME SOFTWARE **DOWNLOADS** FORUM DOCUMENTATION SUPPORT STORE CONTACTS

DOWNLOADS

Older versions

USER FEEDBACK

"Thank you for the software. It's really helpful for my studies."  
R.

You are here: [Home](#) / [Downloads](#)

**Download DICOM software**

**MicroDicom DICOM viewer**

Latest version

SOCIAL

Twitter Facebook YouTube

## Download DICOM software

### MicroDicom DICOM viewer

Latest version

Not interested in this ad

Ad covered content

Ad was too personal

Ad was inappropriate

Installation package:

[MicroDicom viewer 3.2.7 x86](#) (4.12 MB 2020-01-10)

[MicroDicom viewer 3.2.7 x64](#) (4.72 MB 2020-01-10)

Portable zip package(no installation required):

[MicroDicom viewer 3.2.7 x86 zip](#) (4.86 MB 2020-01-10)

[MicroDicom viewer 3.2.7 x64 zip](#) (5.74 MB 2020-01-10)

Autorun package for CD/DVD/USB:

[MicroDicom viewer CD/DVD 3.2.7](#) (10.58 MB 2020-01-10)

Apertura di microdicom-3.2.7-autorun.zip

È stato scelto di aprire:

**microdicom-3.2.7-autorun.zip**  
tipo: Archivio WinRAR ZIP (10,6 MB)  
da: http://www.microdicom.com

**Che cosa deve fare Firefox con questo file?**


Apirlo con WinRAR.ZIP (predefinita)

Salva file

Da ora in avanti esegui questa azione per tutti i file di questo tipo.

OK Annulla


MicroDicom viewer CD/DVD 3.2.7 (10.58 MB 2020-01-10)

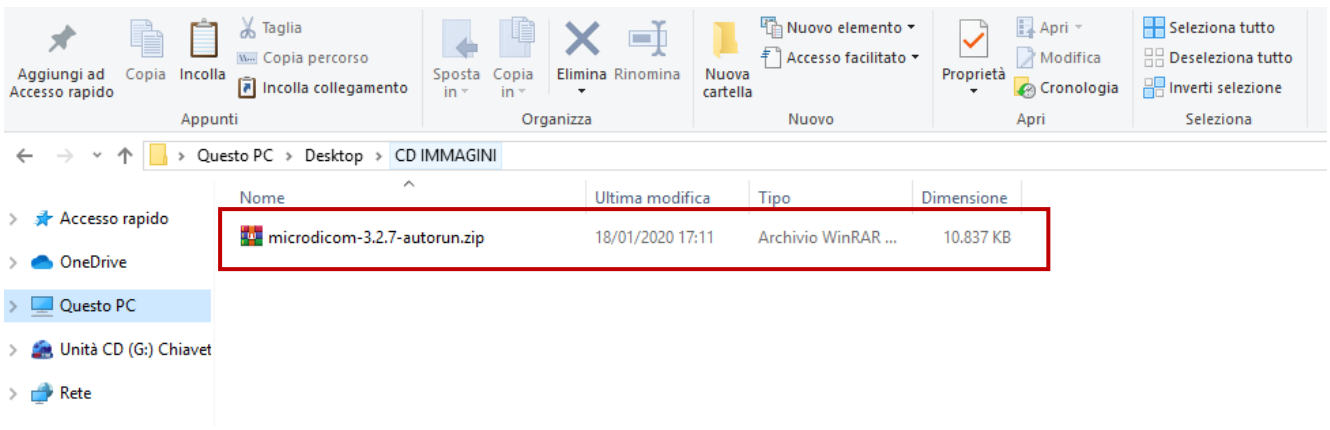


3) Copiare nella stessa Directory (/nome) il file archivio .zip relativo alle Immagini di radiologia, scaricato da <https://radiologia.asst-pini-cto.it>;

Nella pagina intestata **IMMAGINI**, si potrà visualizzare le immagini relative all'esame radiografico.



Per salvare le immagini sul proprio PC, cliccare sull'icona relativa al Menu multifunzione, e successivamente cliccare sul comando: "ESPORTA DIGICOM".

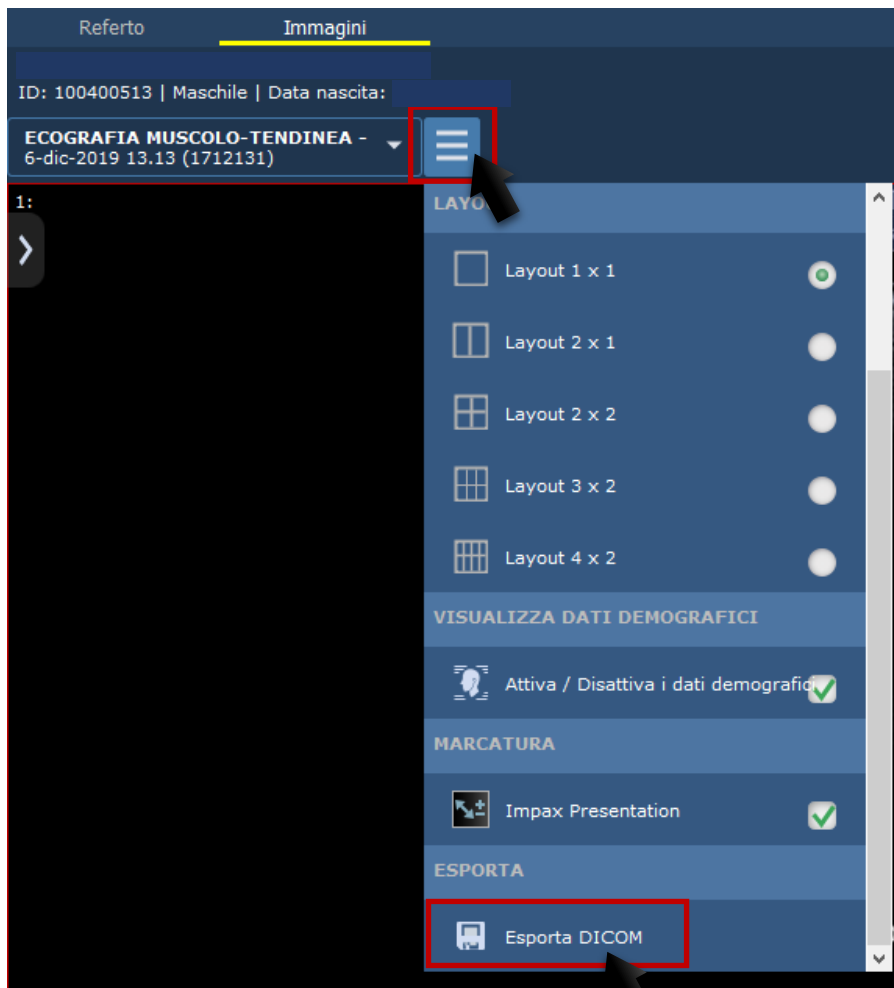


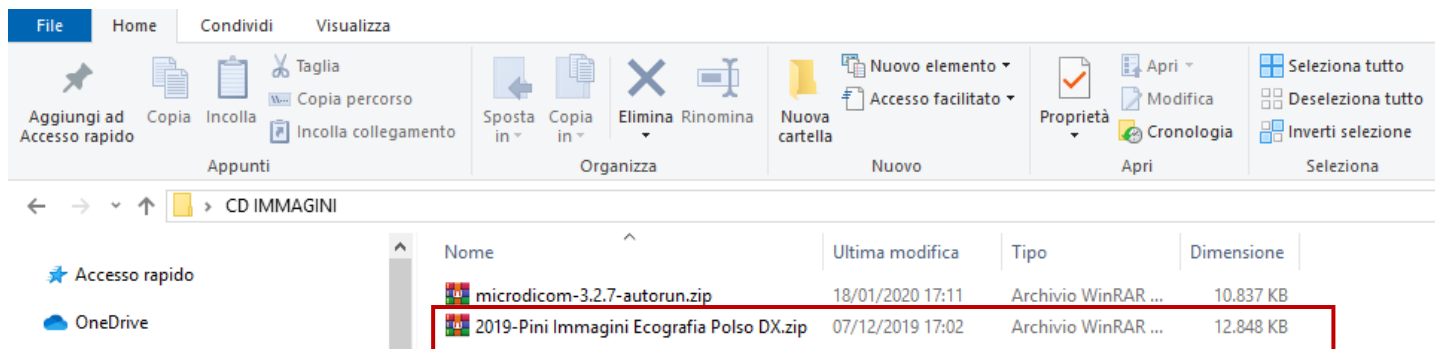


4) Decomprimere nella stessa Directory (/nome) il contenuto dei due files archivio .zip;

Decomprimere il file **microdicom-3.2.7-autorun.zip**

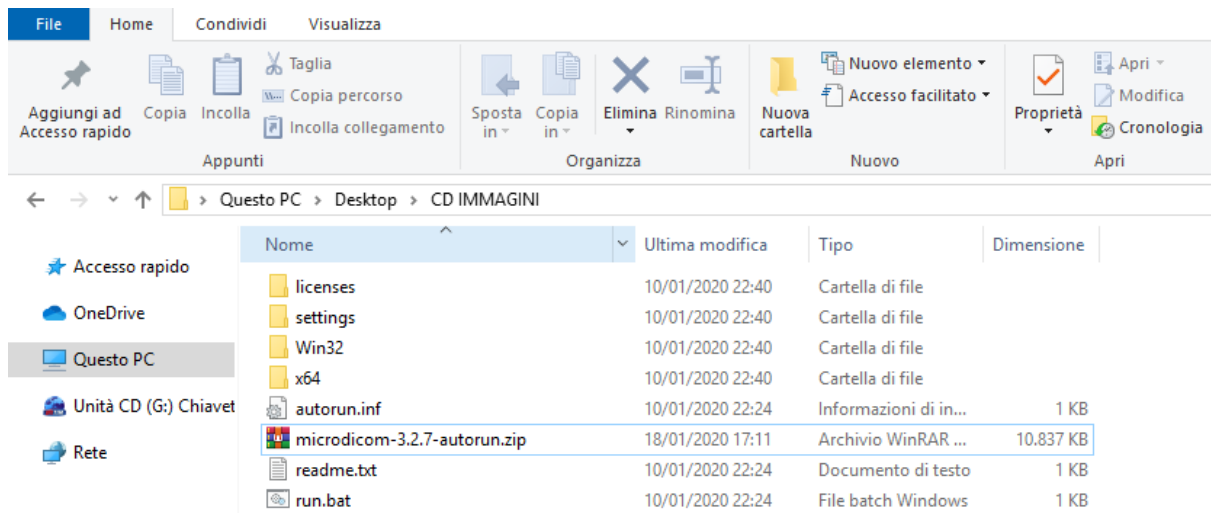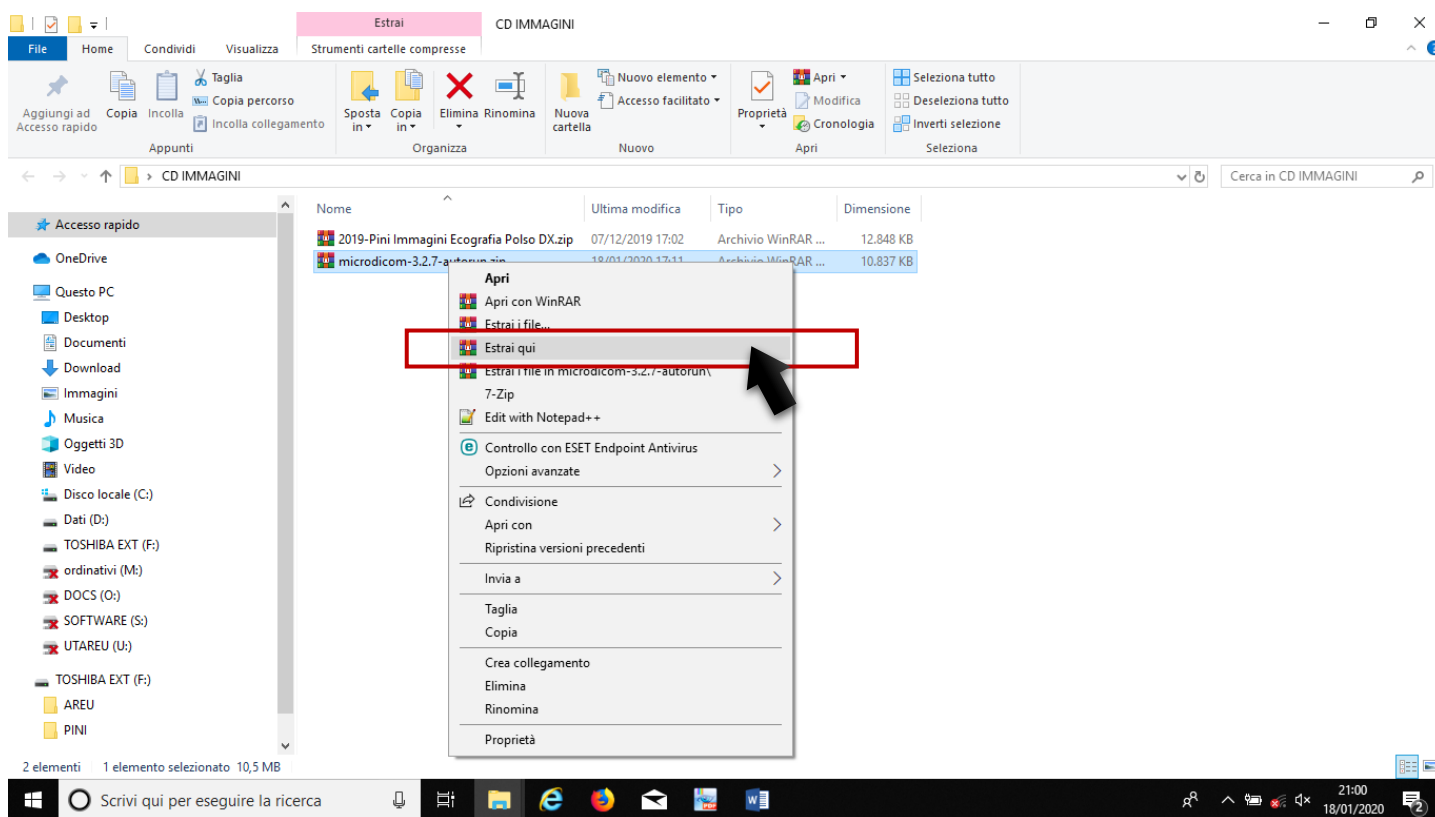


## Decomprimere il file (*immagini radiodiagnostiche*).zip

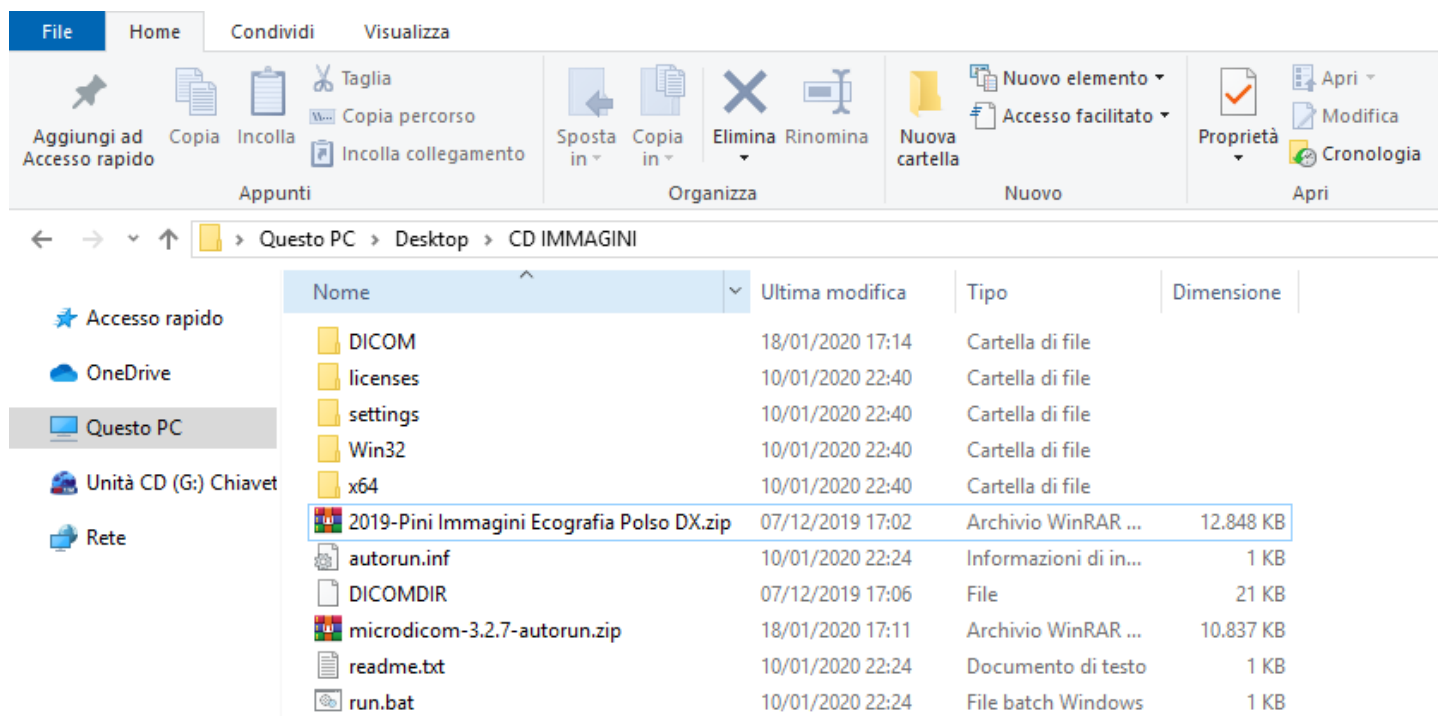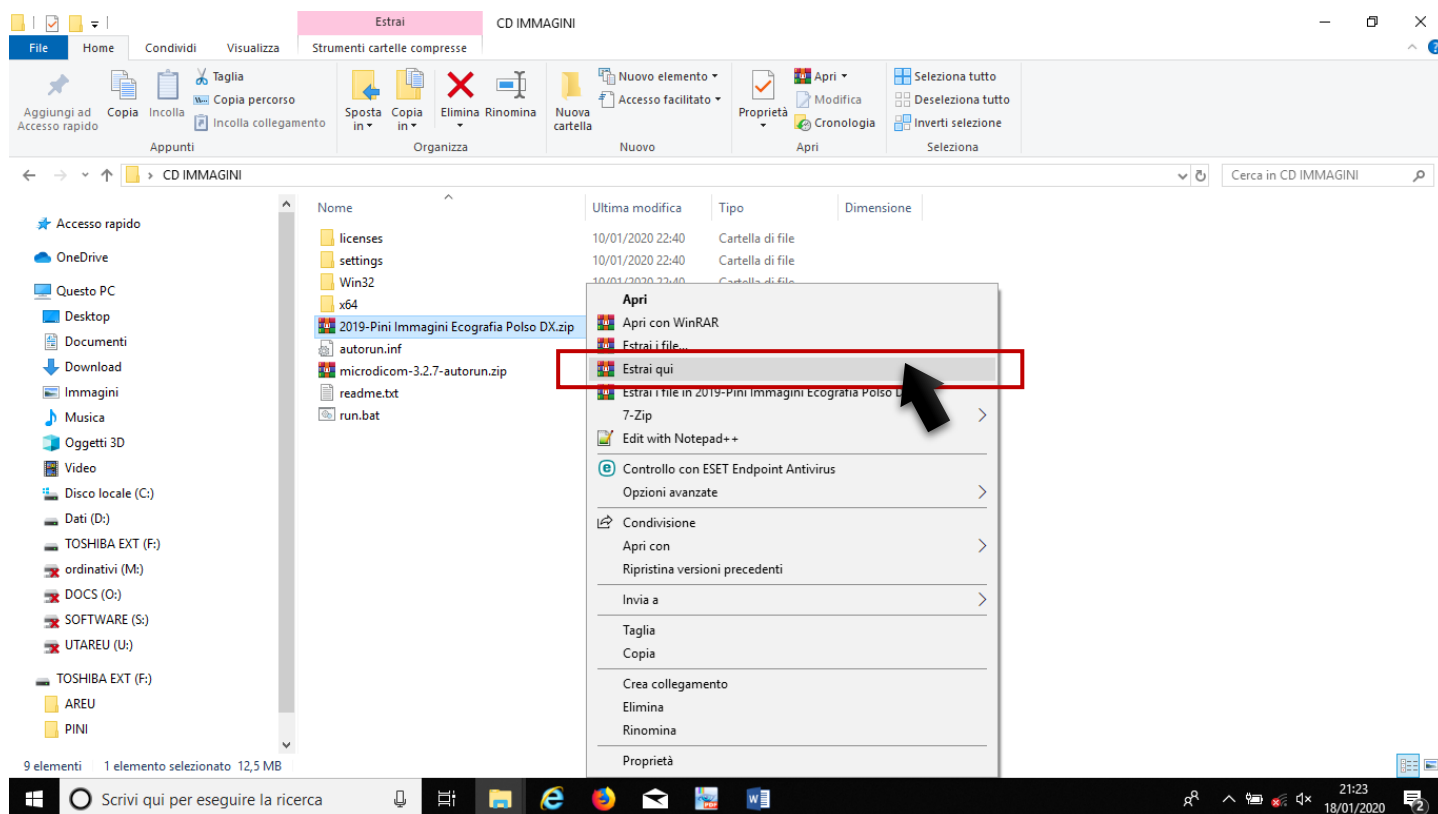


### 5) Masterizzare sul CD/DVD tutto il contenuto della Directory (/nome);



Inserire nel lettore CD/DVD un disco CD/DVD vuoto da masterizzare.

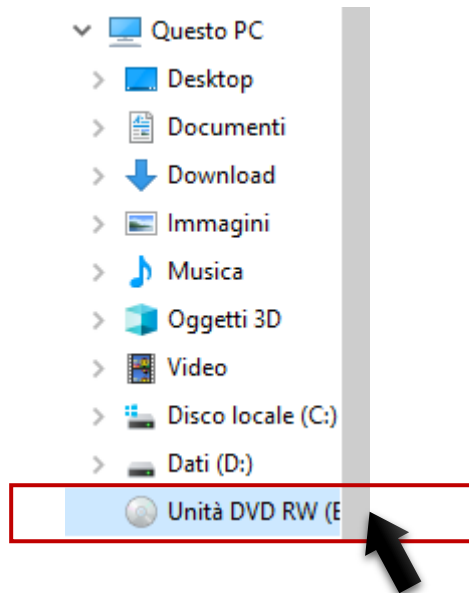


Per masterizzare il contenuto della Directory (/nome) si propone la seguente modalità, **diversamente l'utente può scegliere modalità alternative, che consentano comunque la masterizzazione del contenuto della Directory sul supporto CD/DVD.**

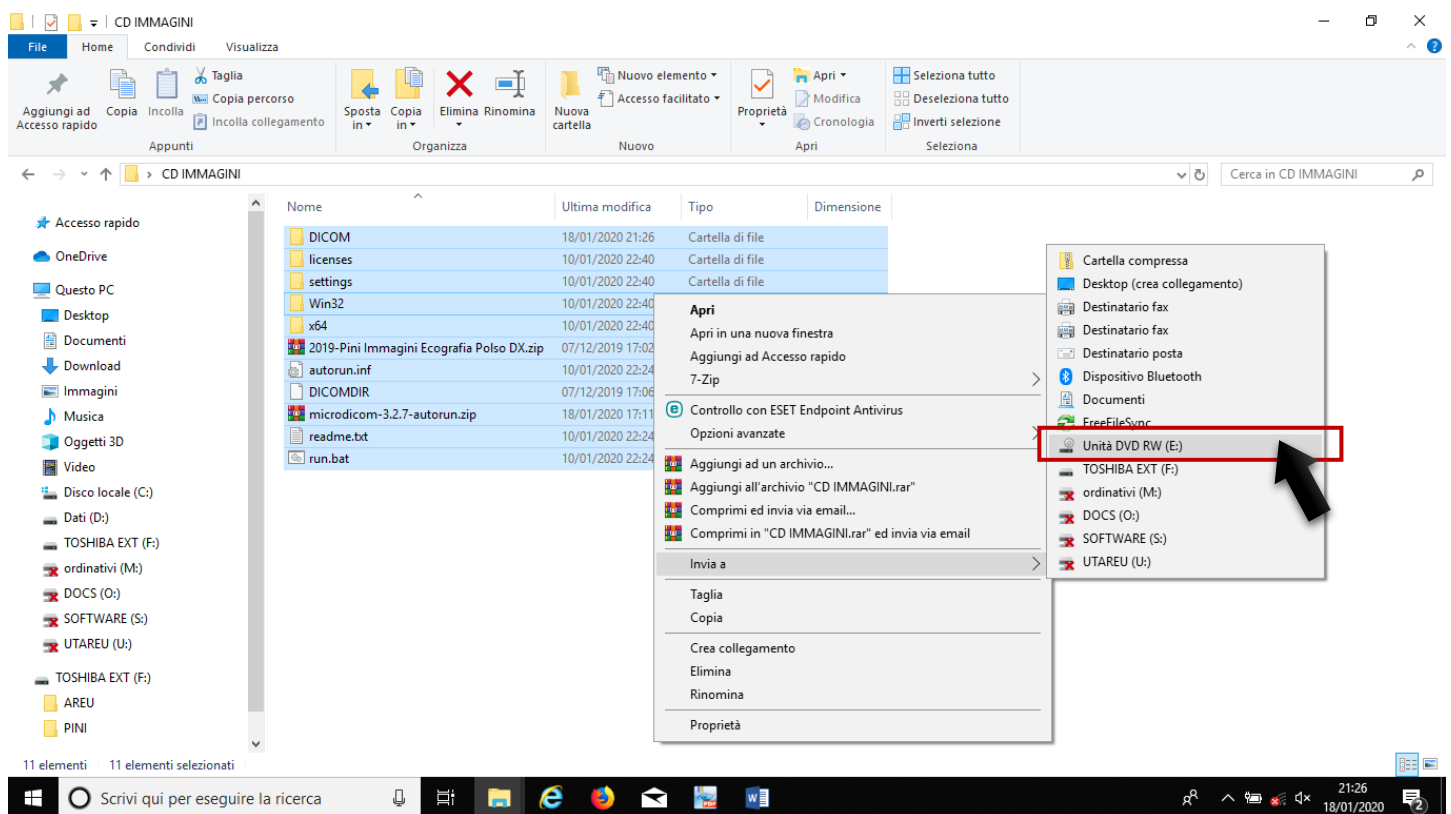

Posizionarsi con il mouse sull'unità CD/DVD e selezionare il comando **scrivi su disco**.

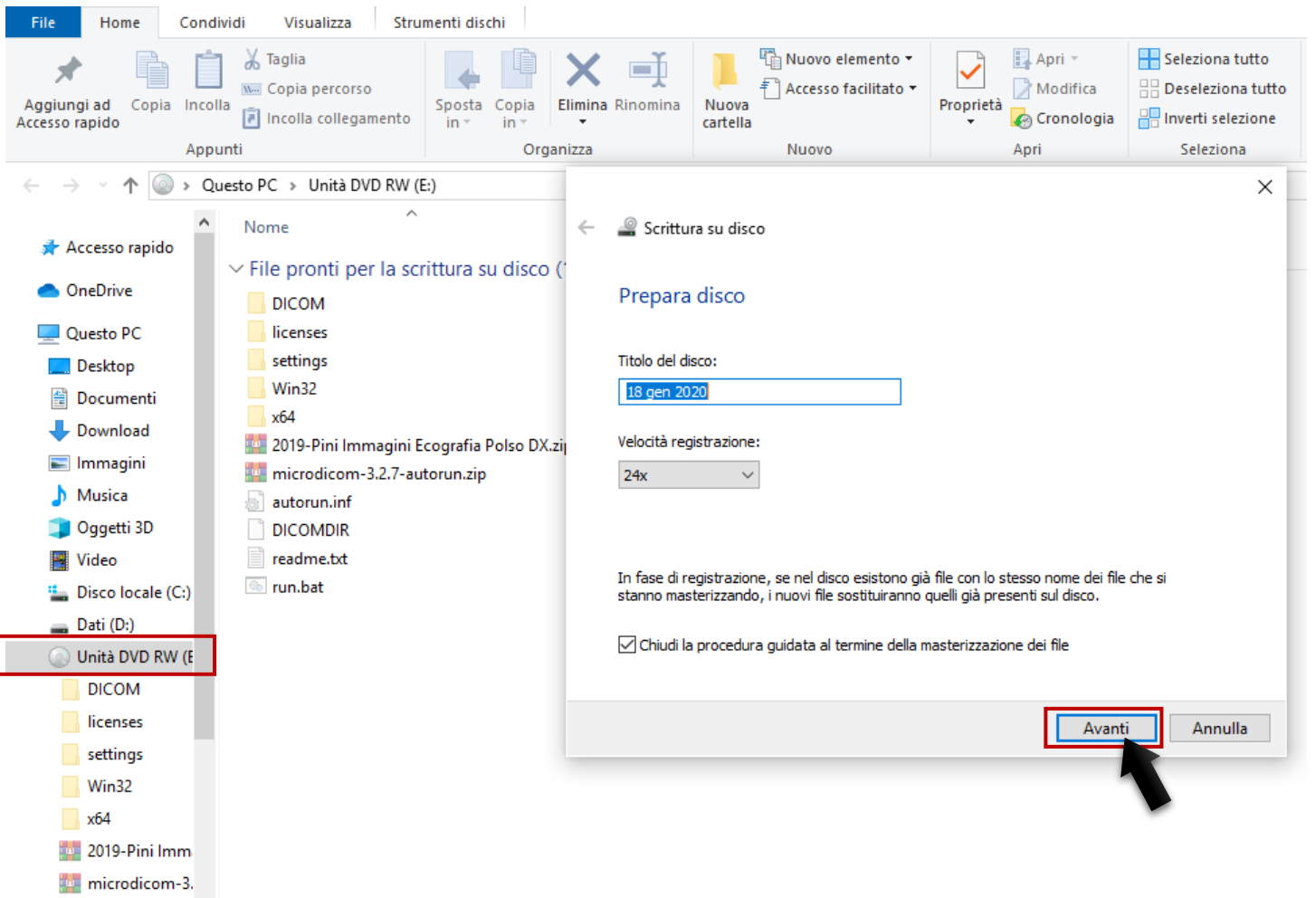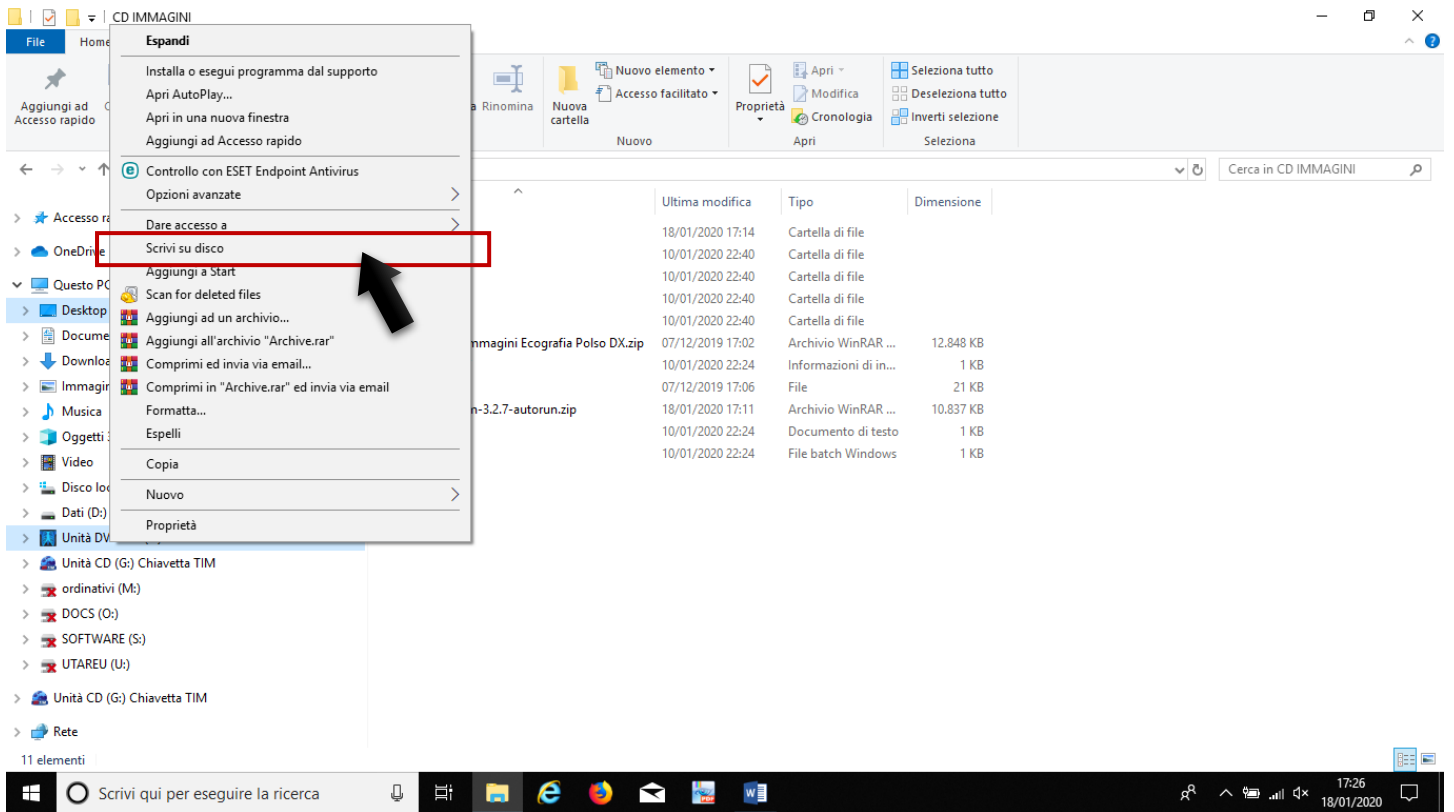

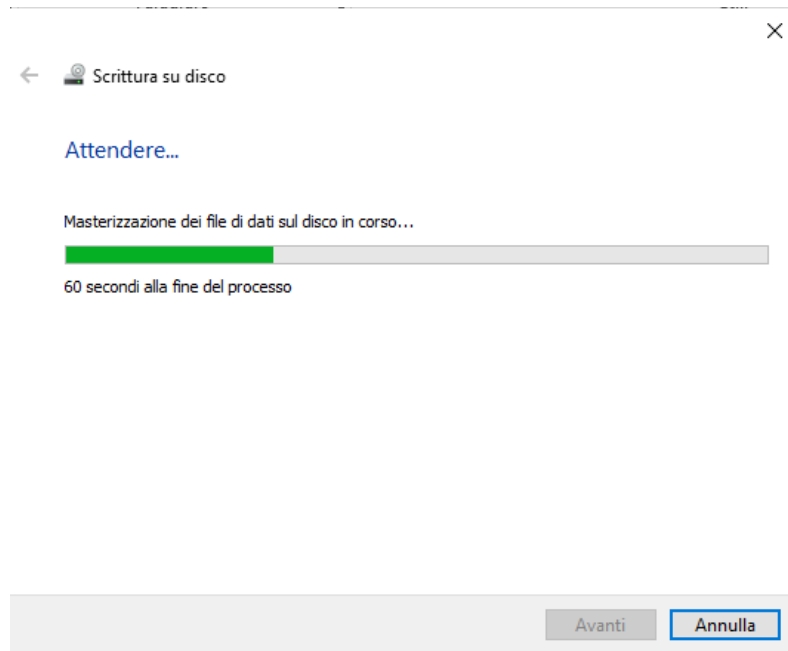

#### INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FILE: **readme.txt**

È un pacchetto di esecuzione automatica per la distribuzione di CD / DVD con file DICOM.

Contiene:

Directory Win32  
directory x64  
directory delle licenze  
directory delle impostazioni  
autorun.inf  
readme.txt  
run.bat

Vedrai in **autorun.inf** che puoi usare "mdicom.exe DICOMDIR". Si aprirà il file DICOMDIR e visualizzerà i file DICOM all'avvio. In questa situazione il file DICOMDIR deve essere posizionato nella **root** del CD. Se si inserisce il file DICOMDIR in un'altra posizione sul CD, è necessario modificare il file **autorun.inf** con il percorso del file DICOMDIR:  
mdicom.exe <path\_to\_DICOMDIR\_file>

Inoltre puoi usare: "mDicom.exe / scan <percorso>". Eseguirà la scansione dei file DICOM.

Copia il contenuto del file .zip e dei tuoi file DICOM su CD / DVD. Si noti che il contenuto del file zip deve essere nella root del CD / DVD.

Se il visualizzatore DICOM di MicroDicom non inizia con l'esecuzione automatica, apri il visualizzatore facendo doppio clic sul file "**run.bat**".