



Dipartimento Area dei Servizi
SC PATOLOGIA CLINICA

INDICAZIONI PER LA FASE PREANALITICA

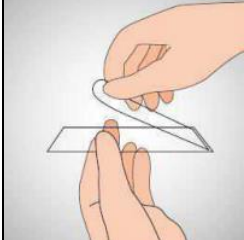
SETTORE MICROBIOLOGIA

EMOCOLTURA		SANGUE e MATERIALI VARI	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
	Flacone da emocoltura T. VERDE(aerobi) T. ARANCIO(anaerobi) Per assicurare una maggiore sensibilità prelevare almeno 2 set per paziente	SANGUE 8-10 ml per ogni flacone Liquor Asp. Midollare L. sinoviale, pleurico, pericardico e ascitico Essudati	Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE in attesa dell'invio al Laboratorio	Al di fuori dell'orario di accettazione della Microbiologia inviare quanto prima il campione al Laboratorio urgenza Posizionare l'etichetta in verticale come indicato nell'immagine
	Flacone da emocoltura pediatrico T. GIALLO	SANGUE 1-4 ml		TEMPERATURA AMBIENTE in attesa dell'invio al Laboratorio	
URINOCOLTURA		URINA	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
	BARATTOLO per la raccolta aspirare, utilizzando l'apposito raccordo, in PROVETTA SOTTOVUOTO 5 ml contenente acido borico	URINA 5 ml <u>inviare solo la provetta</u>	Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE: 1 ora Temperatura 2-8°C: 24 ore	
COPROCOLTURA		FECI	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
	TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO LIQUIDO		Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE: 24-48 ore	





Dipartimento Area dei Servizi
SC PATOLOGIA CLINICA

RICERCA ANTIGENI DI <i>HELICOBACTER PYLORI</i>		FECI	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 COD: D678821	BARATTOLO STERILE CON PALETTA			Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C per un massimo di 48 ore
RICERCA <i>CLOSTRIDIUM DIFFICILE</i>		FECI	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 COD: D678821	BARATTOLO STERILE CON PALETTA	5-10 ml di materiale fecale costituito da feci non formate	Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C per un massimo di 48 ore	CAMPIONI NON IDONEI: FECI FORMATE E TAMPONE RETTALE CHE NON CONTENGA VISIBILMENTE MATERIALE FECALE
RICERCA PARASSITI INTESTINALI		FECI	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 COD: D678822	BARATTOLO CON CUCCHIAINO E CONSERVANTE DEDICATO	Inserire il materiale fecale nella provetta fino a che il liquido contenuto raggiunga la linea rossa sull'etichetta. Chiudere bene ed agitare finché il liquido ed il campione sono ben mescolati. Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso.	COMPLETATA LA RACCOLTA DEI 3 CAMPIONI	TEMPERATURA AMBIENTE	Invio di 3 campioni raccolti a giorni alterni e consegnati tutti insieme al laboratorio. I campioni devono essere accompagnati dalla scheda anamnestica
RICERCA UOVA DI OSSIURI			INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
	UTILIZZARE SOLO NASTRO ADESIVO TRASPARENTE DI LUNGHEZZA NON SUPERIORE AL VETRINO. NON AVVOLGERE LO SCOTCH INTORNO AL VETRINO.	Effettuare il prelievo al mattino possibilmente molto presto, prima di lavarsi. Catturare le uova e/o le larve facendole aderire alla superficie gommosa dello scotch	COMPLETATA LA RACCOLTA DEI 3 CAMPIONI	TEMPERATURA AMBIENTE	INVIO di 3 campioni raccolti a giorni alterni e consegnati tutti insieme al laboratorio





Dipartimento Area dei Servizi
SC PATOLOGIA CLINICA

RICERCA PARASSITI EMATICI		SANGUE INTERO	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
	PROVETTA DA EMOCROMO		Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE	CONTATTARE IL LABORATORIO PRIMA DELL'INVIO. I CAMPIONI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DALLA SCHEDA ANAMNESTICA PER ESAME PARASSITOLOGICO
COLTURALE MATERIALE RESPIRATORIO		ESPETTORATO/ BAL/BAS	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
	BARATTOLO STERILE TAPPO A VITE	Espettorato	Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE: 2 ore	NON INVIARE MATERIALE SALIVARE Si raccomanda di verificare il corretto avvitamento del tappo e sigillare con parafilm
 CONTENITORE BOCCA LARGA: COD D678839 FALCON 50 ml: COD D671527 PROVETTA: COD D679607	PROVETTA STERILE TAPPO ROSSO A VITE	Broncoaspirato e Broncolavaggio	Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE: 2 ore	
COLTURALE VARIE SEDI		TAMPONE	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 REGULAR: COD D671025 MINITIP: COD D671026	TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO LIQUIDO	Tampone varie sedi	Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE: 24-48 ore	Il tampone con tappo rosso ha una maggiore dimensione del floccato rispetto a quello con tappo arancione.
LIQUORCOLTURA		LIQUOR	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 COD D679607	PROVETTA STERILE TAPPO ROSSO A VITE. SE IL MATERIALE NON PUO' ESSERE INVIATO SUBITO IN LABORATORIO O SE PROVENIENTE DA RACCOLTA PURULENTA UTILIZZARE UN FLACONE DA EMOCOLTURA PEDIATRICA INSIEME AL QUALE INVIARE IL MATERIALE RACCOLTO NELLA PROVETTA	Liquido cefalorachidiano	Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE	Al di fuori dell'orario di accettazione della Microbiologia inviare il campione al Laboratorio urgenza





Dipartimento Area dei Servizi
SC PATOLOGIA CLINICA

 PEDIATRICA: COD F2006080	TAPPO ROSSO				
COLTURALE CAMPIONI LIQUIDI E BIOPSIE		ESSUDATI, LIQUIDI DI DRENAGGIO, BIOPSIE	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 COD D679607	PROVETTA STERILE TAPPO ROSSO A VITE	Essudati, materiali intraoperatori, drenaggi, liquido pleurico, liquido pericardico, biopsie	Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C: per un massimo di 24 ore	SOLO PER RICERCA BATTERI AEROBI E MICETI
  FORNITO DAL LAB. MICROBIOLOGIA	PORTAGERM O BRODO THIOGLICOLLATO	Essudati, materiali intraoperatori, drenaggi, liquido pleurico, liquido pericardico. Per il materiale solido (biopsie) utilizzare il brodo thioglicollato	Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE AL BUIO per un massimo di 24 ore	SOLO PER RICERCA BATTERI ANAEROBI
COLTURALE CATETERI VENOSI ED ARTERIOSI		PUNTA DI CATETERE	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 COD D679607	Punta di catetere vascolare in contenitore sterile		Nel più breve tempo possibile	Temperatura ambiente se consegnato entro 2 ore o 2-8°C entro 24 h	Inviare un frammento non più lungo di 5 cm. Se l'invio del campione non può avvenire in orario di apertura del laboratorio di microbiologia, bagnare la punta del catetere con <u>POCHE</u> gocce di fisiologica.
COLTURA BIOPSIE, REPERTI OPERATORI, VALVOLE, PROTESI, CATETERI PERITONEALI		MATERIALE VARIO	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 COD D678839	Depositare il materiale all'interno di un contenitore sterile di dimensioni adeguate al frammento. Inviare frammenti piccoli, per materiali di grandi dimensioni strofinare la		Nel più breve tempo possibile	Temperatura ambiente se consegnato entro 2 ore o 2-8° C entro 24 h	





Dipartimento Area dei Servizi
SC PATOLOGIA CLINICA

	REGULAR: COD D671025 MINITIP: COD D671026	superficie con un tampone sterile ed inviare il tampone.				
ESAMI SIEROLOGICI			SIERO	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
	DA 4 ml: COD 673789 DA 7 ml: COD D673624	PROVETTA STERILE VACUTAINER TAPPO BIANCO O ARANCIONE CON GEL	Coagulato	Nel più breve tempo possibile	TEMPERATURA AMBIENTE	
RICERCA ANTIGENI URINARI			URINE	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
	COD D673995	VACUETTE 10 ML (senza acido bórico)		Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C: per un massimo di 24 ore	Solo per ricerca di <i>Legionella pneumophila</i> e <i>Streptococcus pneumoniae</i>
RICERCA MICOBATTERI			VARIE SEDI	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
	COD D671527	BARATTOLO STERILE TAPPO A VITE TIPO FALCON VOLUME TOTALE RICHIESTO 50ML		Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C: per un massimo di 24 ore	
	COD D678839	BARATTOLO STERILE TAPPO A VITE	ESPETTORATO	Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C: per un massimo di 24 ore	INVIO PER 3 GIORNI CONSECUTIVI
	COD D679607	PROVETTA STERILE TAPPO ROSSO A VITE	TUTTI I MATERIALI LIQUIDI E BIOPSIE	Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C: per un massimo di 24 ore	SPECIFICARE LA SEDE DEL PRELIEVO
	COD D679607	PROVETTA STERILE TAPPO ROSSO A VITE CON AGGIUNTI 100mg DI CARBONATO DI SODIO OGNI 50ML DI ASPIRATO	ASPIRATO GASTRICO	Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C: per un massimo di 24 ore	





Dipartimento Area dei Servizi
SC PATOLOGIA CLINICA

 COD: D678821	BARATTOLO STERILE CON PALETTA	FECI	Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C: per un massimo di 24 ore	ESEGUIBILI SOLO ESAME MICROSCOPICO E CULTURALE
 FORNITO DAL LAB. MICROBIOLOGIA PREVIO CONTATTO TELEFONICO	EMOCOLTURA flacone BACTEC dedicato	SANGUE da 1 a 5 ml Aspirato midollare	Nel più breve tempo possibile		PRIMA DI EFFETTUARE IL PRELIEVO CONTATTARE IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA
ELASTASI FECALE		FECI	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 Fornito dal Laboratorio di Autoimmunità	PROVETTA CONTENENTE LIQUIDO DI ESTRAZIONE PER ELASTASI		Entro il giorno successivo	Temperatura 2-8°C: per un massimo di 24 ore	Svitare il tappo ed inserire l'asticella all'interno del campione di feci fino al riempimento di tutte le scanalature. Non inserire altro materiale.
CALPROTECTINA		FECI	INVIO AL LABORATORIO	CONSERVAZIONE	NOTE
 COD: D678821	BARATTOLO STERILE CON PALETTA		Nel più breve tempo possibile	Temperatura 2-8°C: PER 7 GIORNI	Non sono idonei campioni di feci mucose, emorragiche e tamponi fecali/rettali

