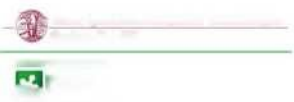


创伤骨科专科中心 加埃塔诺·皮尼-CTO 社会卫生系统 伦巴第大区 地方医疗机构加埃塔诺·皮尼 	信息表	版本 0	第 1 / 1 页
	采集和保存 24 小时酸化尿液 的说明	P06_A0250_MAN001_FI004 编号 P06_A0250_MAN001	

以下检测需要收集 **24 小时酸化尿液**：

- ⇒ 尿钙
- ⇒ 尿磷
- ⇒ **5-羟基吡啶乙酸**
- ⇒ 高香草酸
- ⇒ 香草杏仁酸
- ⇒ 尿儿茶酚胺（肾上腺素-去甲肾上腺素）

采集方式

- ⇒ 醒来后，放弃第一次排出的尿液（无需采集）。
- ⇒ 从这之后，收集 **24 小时** 内的所有尿液（即全天尿液和隔夜尿液），包括开始收集后第二天早上的第一次排尿；这次的尿液采集工作到此结束。

警告

由于容器中含有 **10 毫升 10% 的盐酸**（强腐蚀性物质），请采取以下预防措施：

- ⇒ 不要直接向容器内排尿，而应使用合适的容器；
- ⇒ 保持容器密闭，切勿倒置，以免产品意外溢出；
- ⇒ 如果酸液不慎接触皮肤，应立即用大量清水冲洗并咨询医生；
- ⇒ 容器不必放在冰箱里，放在阴凉通风处即可；
- ⇒ 不要中断任何正在进行治疗；
- ⇒ 无需遵守特殊饮食规定。

2024/01/07